

【酸素なんて“あたりまえ”
と思っている方へ…】

新鮮で安全な酸素を
吸っていますか？

近年、私達の周りの環境は、
自然破壊などにより
地球全体が、新鮮な酸素の
欠乏状態に陥っていると
いわれています。

人の身体は、
「脳」「心臓」「肺」
をはじめ、それらをめぐる
血液に、新鮮な酸素が
十分供給されなくては、
健康に支障をきたすことと
なるのです。

「疲労回復」

「体力増進」

「ストレス解消」

「美容」

などに新鮮な酸素を取り入れ、
今日からあなたも
健康な暮らしを
お送りください…

新鮮な酸素で健康な暮らしを…

携帯用酸素発生器

FOREST
O₂
OXYGEN GENERATOR



オーツーフォレスト ファミリータイプ

水さえあれば、どこでも手軽に酸素吸入ができます。

わずか20分間の酸素吸入で心も体もリフレッシュ。

100%高圧酸素で安全。海外にも携帯できます。

廃液は塩と炭素ですから無害。台所で流せます。

【総発売元】

〒028-0041 岩手県久慈市長内町32-18-2

株式会社ジュークス

TEL 0194-61-1977 FAX 0194-61-1978

URL: <http://jukes-k.co.jp>

人の体と心の健康には、なによりもまず新鮮な酸素が不可欠です。しかし、空気の汚染や忙しさによるストレスなどから、現代に生きる私たちは、知らず知らずのうちに酸素不足の体質になっていることが多くあります。「オーツーフォレスト」は、水の中に酸素発生剤を入れるだけで新鮮な酸素が補給できる簡易的な酸素発生器です。ついイライラしたり、疲れたなと思ったら、いつでも手軽に 20 分間の“オーツーフォレスト・ブレイク”をどうぞ。

酸素吸入の効果

- 脂肪燃焼、ダイエットの補助にどうぞ。
- 疲労、ストレス解消の手助けにどうぞ。
- 細胞を活性化させる美肌効果にはたらきかけます。
- お酒やタバコのあとの酸素不足を感じたときに。

携帯用酸素発生器 オーツーフォレスト ファミリー

発生方式: 化学反応式
発生時間: 約20分
本体寸法/重量: 250×190×105 mm/1kg
酸素発生剤: A 剤 過酸化ナトリウム(100g)
B 剤 ポウ硝(5g)

このような場合にお使いください

スポーツの前後に



多量の酸素が必要なスポーツ前後の疲労回復、運動機能回復を補助したいときに。

会議・仕事の後に



長時間の会議や集中的作業でたまったストレスを解消し、リフレッシュしたいときに。

受験勉強中に



集中力が低下して勉強がはかどらないとき。思考力・集中力回復のお手伝いに！

就寝前に



不眠気味の時にもおすすめ。眠る前 30 分ほど酸素を補給。たっぷりの睡眠の補助に。


音楽鑑賞・読書時に



休日は酸素を吸いながら、音楽鑑賞・読書などはいかがですか？ ゆっくりとリラックスしたいときに。

オーツーフォレスト ファミリー ご使用方法

1. 本体の中の透明な容器を取り出し、加湿洗浄槽と反応槽、それぞれに半分くらいの高さまで水を入れます。

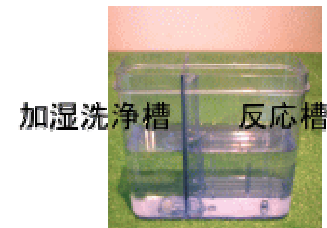

2. 水を入れた容器を、本体に戻します。



3. 反応槽側に、酸素発生剤 A・B を入れます。



4. 正しく蓋をしてハンドルを持ち上げロックします。(蓋の位置が正確でない場合はロックできません。)



5. 上蓋の左上の酸素出口にチューブを差し、酸素吸入マスクを口にあてます。



※1 回分で、約20分間酸素が発生します。酸素吸入後は、反応液を流しなどに捨て、よく洗って下さい。

オーツーフォレスト ファミリー セット内容



本体、マスク、カニューラ、酸素発生剤 A・B 各 10 回分、イヤerset、取扱説明書

イヤerset 装着例



酸素の発生を多くしたい時は、パウダー2回分(A・B各2袋)を入れて下さい。